

INSTRUCTIONS AND SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING: To minimize the risk of injury from improper and unsafe use of this cane, read these instructions and safety precautions before using. Also, go to [HurryCane.com](#) and view the tips and tricks videos.


Intended Use and Limitations:

- This cane is a walking aid and is not intended to absorb the full weight of the user.
- Not to be used by persons heavier than 350 lbs (158 kg).
- Not intended for use on ice or other slippery surfaces as it has the potential to slip.


Safety Precautions:

- Consult a physician before using any assisted mobility device.
- Do not use unless individual segments are securely joined together and push button is fully engaged.
- When assembling individual segments, keep fingers away to avoid being pinched.
- Do not stretch the internal elastic cord more than necessary to assemble or disassemble the segments. Do not use cane if elastic cord is cut, frayed, or damaged.
- Applying downward pressure on the base (e.g. stepping on the base) while lifting up on the handle can cause the cane segments to separate and the cane to collapse, possibly causing you to fall.
- If the handle or bottom base becomes loose, stop using cane immediately and contact HurryCane customer service.

SETUP INSTRUCTIONS Read before setting up and using.

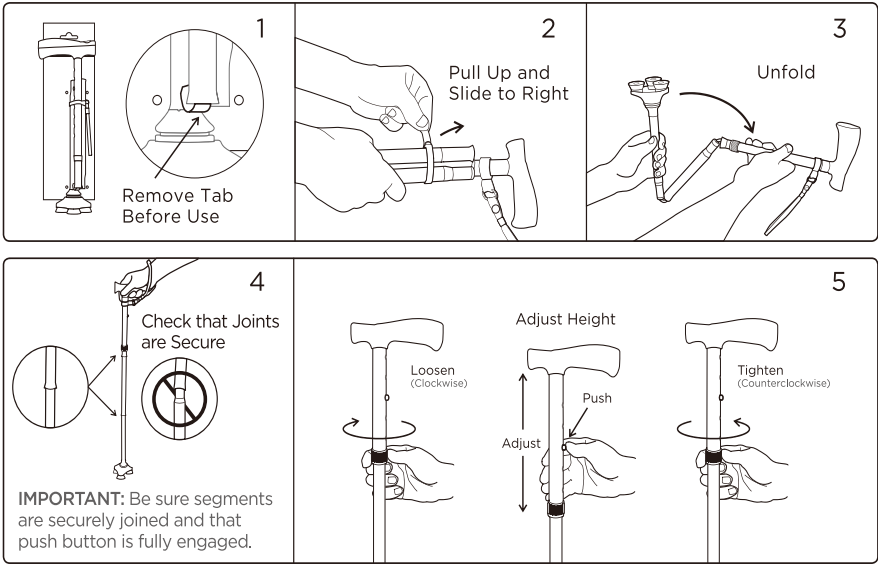

SAFETY PRECAUTIONS

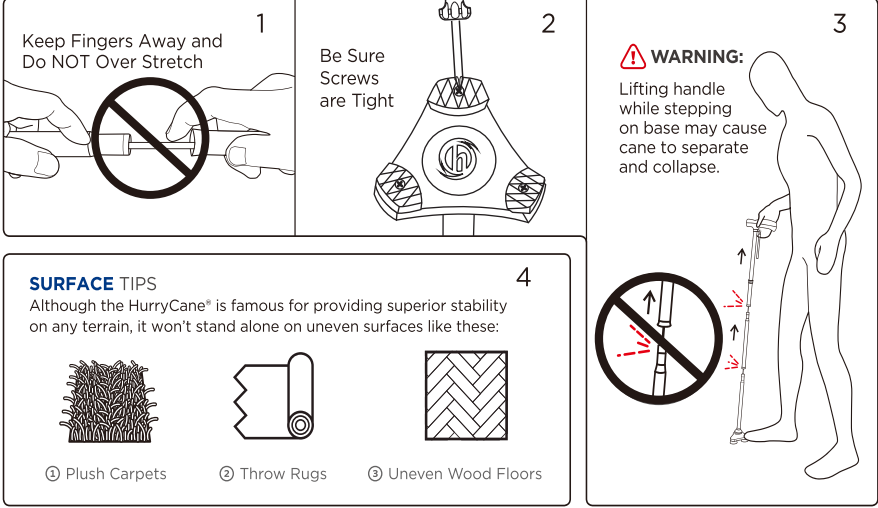

INSTRUCTIONS ET MESURES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT: Lisez ces instructions et mesures de sécurité avant d'utiliser cette canne afin de réduire les risques de blessure reliés à une utilisation inadéquate ou inappropriée de ce produit. Visitez aussi le site [HurryCane.com](#) et consultez les vidéos de conseils et astuces.

Utilisation préconisée et limites:


- Cette canne est un appareil d'aide à la marche; elle n'a pas été conçue pour soutenir tout le poids de l'utilisateur.
- Elle ne doit pas être utilisée par une personne de plus de 158 kg (350 lb).
- Elle ne doit pas être utilisée sur une surface glacée ou glissante, car elle pourrait glisser.

Mesures de sécurité:


- Consultez un médecin avant d'utiliser tout appareil d'aide à la mobilité.
- N'utilisez que si tous les segments sont joints adéquatement, avec le bouton à ressort bien engagé.
- Évitez de vous pincer les doigts lorsque vous assemblez les segments.
- N'étirez pas le cordon élastique interne plus que ce qui est nécessaire pour assembler les segments. N'utilisez pas la canne si le cordon élastique est coupé, effiloché ou abimé.
- Évitez d'appuyer sur le pied (marcher dessus) lorsque vous soulevez la canne; ceci pourrait séparer les segments et faire en sorte que la canne se replie, causant votre chute.
- Si la poignée ou la base devient lâche, cessez immédiatement d'utiliser la canne et communiquez avec le service à la clientèle de HurryCane.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉPARATION

Lisez ceci avant de préparer et d'utiliser la canne.

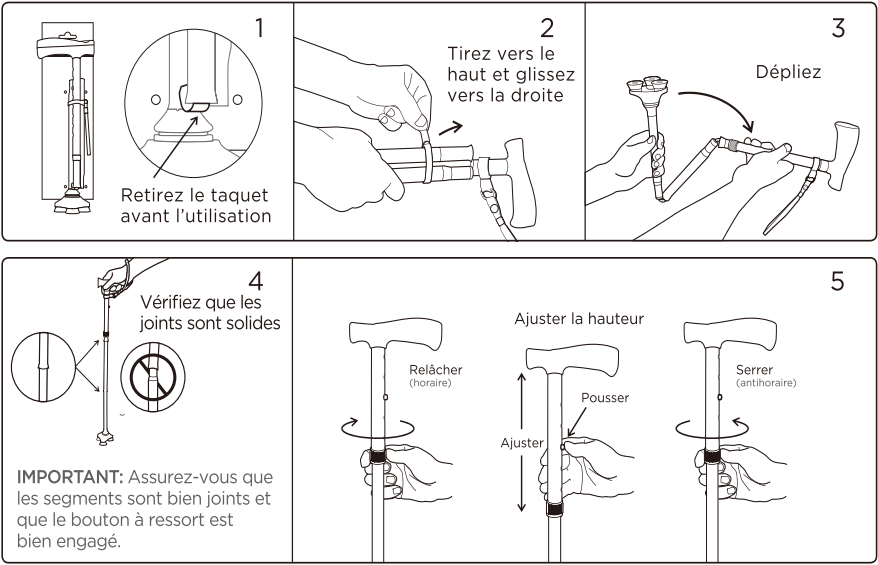

MESURES DE SÉCURITÉ

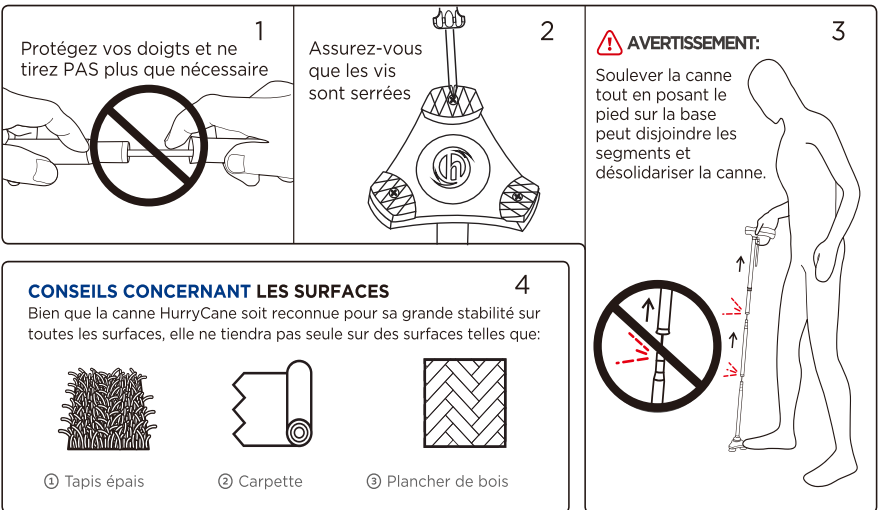

INSTRUCCIONES Y PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: Para minimizar el riesgo de lesiones debido al uso inadecuado e inseguro de este bastón, leer estas instrucciones y precauciones de seguridad antes de su uso. Consultar además [HurryCane.com](#) para ver sugerencias y videos de trucos.

Uso previsto y limitaciones:


- Este bastón es una ayuda para caminar y no está previsto para soportar el peso completo del usuario.
- No deben usarlo personas con un peso mayor de 158 kg (350 lb).
- No está previsto para usarse sobre hielo u otras superficies resbaladizas ya que puede presentar la posibilidad de resbalarse.

Precauciones de seguridad:


- Consultar con un médico antes de usar cualquier dispositivo de asistencia en la movilidad.
- No usar a menos que los segmentos individuales estén unidos de forma segura y el botón a presión esté engranado completamente.
- Al armar los segmentos individuales mantener los dedos alejados para evitar pellizcarse.
- No estirar el cordón elástico interno más de lo necesario para armar o desarmar los segmentos. No usar el bastón si el cordón elástico está cortado, deshilachado o dañado.
- Aplicar presión hacia abajo sobre la base (es decir, pararse sobre la base) mientras se levanta el bastón hacia arriba puede hacer que los segmentos del bastón se separen y que colapse el bastón, posiblemente ocasionando su caída.
- Si la agarradera o la base inferior se aflojan, deje de usar el bastón inmediatamente y póngase en contacto con el servicio al cliente de HurryCane.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Leer antes de instalar y usar.

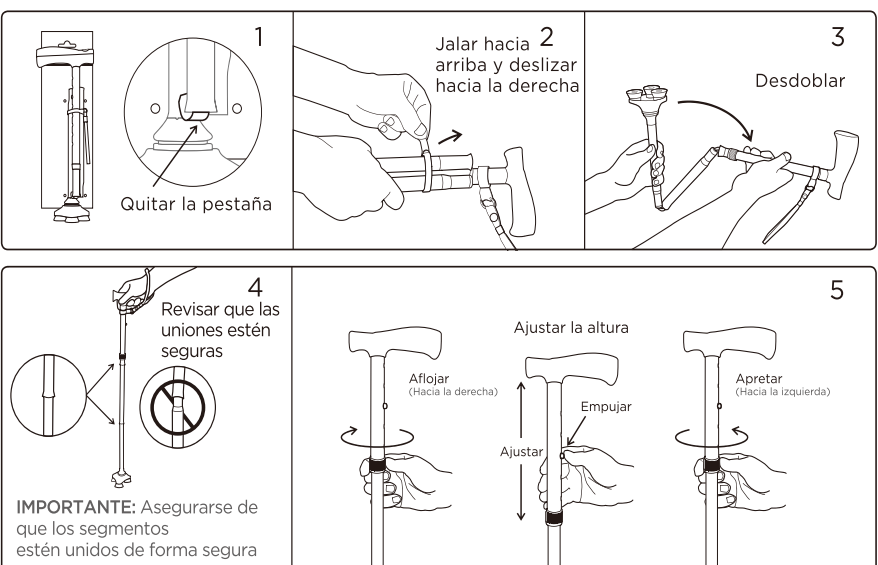

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

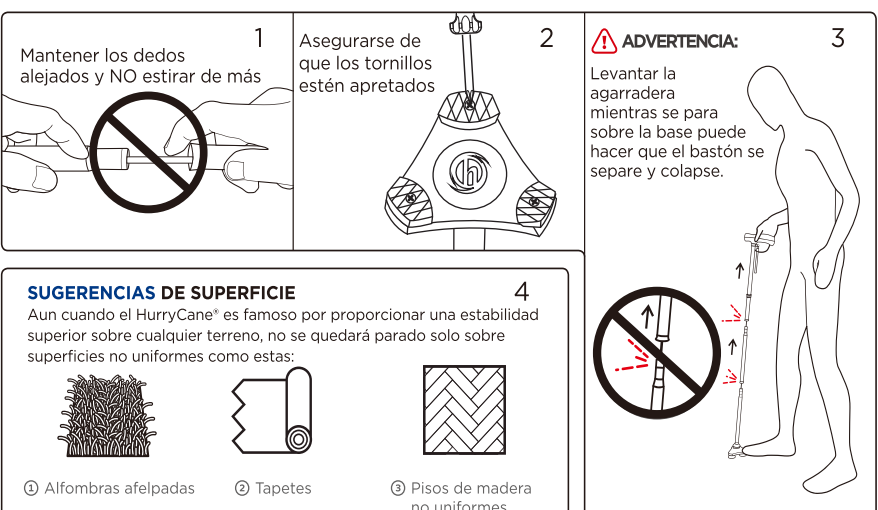

MAINTENANCE

- Check elastic cord before every use. Do not use cane if cord is cut, frayed, or damaged.
- Periodically check the screws on the feet to be sure they are tight.
- Replace the feet every six months. See [HurryCane.com](#) to purchase new feet.
- Enhance your mobility at [HurryCane.com](#) for official HurryCane® accessories.



Drive PreserveTech™ products are manufactured with an antimicrobial* agent that helps to minimize the growth of stain and odor-causing bacteria and mold on treated surfaces. Treated surfaces on this product include the handgrip.

*Antimicrobial properties are built in to protect the products. These products do not protect users or others against bacteria, viruses, germs or other disease organisms.

SPECIFICATIONS


- FDA-listed
- Eight adjustable heights: From 30 ½" to 37 ½"
- Folded size: 13 ¾"

Comments, Feedback, or Questions


Toll-Free Number: 1-800-933-1136
E-mail: succes@hurrycane.com
[HurryCane.com](#)
Like us on Facebook: [facebook.com/AllTerrainCane](#)

RESET THE FLEX


The pivoting base of a new HurryCane® is designed to have less flexibility initially but will adapt to the user's movement over time. As the cane adapts to your movements, your HurryCane® may need to have its flex reset when you want the cane to stand beside you without holding on to it. Simply "reset the flex" by following these 3 easy steps:

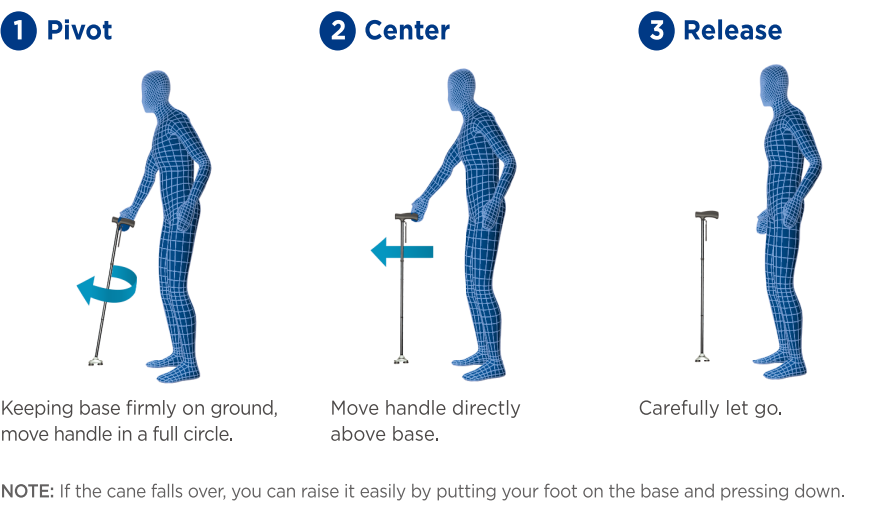

STORAGE INSTRUCTIONS

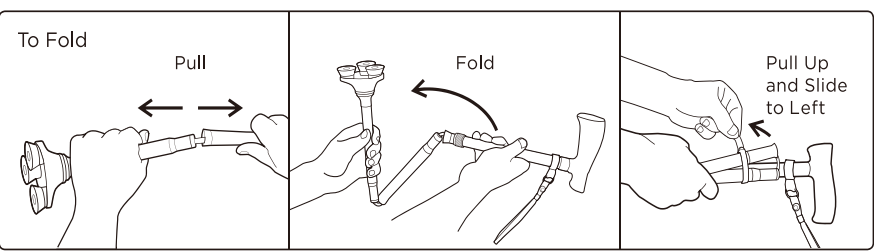

© 2022 HurryWorks LLC
99 Seaview Boulevard | Port Washington, NY 11050
[HurryCane.com](#) | **Made in China**
VER.A.5.22
For patent information, visit [www.drivemedical.com/patent](#)

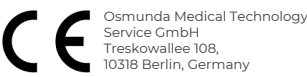

ENTRETIEN

- Vérifier l'état du cordon élastique avant chaque utilisation. N'utilisez pas la canne si le cordon élastique est coupé, effiloché ou abimé.
- Vérifiez périodiquement que les vis du pied sont bien serrées.
- Remplacez le pied tous les six mois. Consultez le site [HurryCane.com](#) pour l'achat d'un nouveau pied.
- Améliorez votre mobilité grâce aux accessoires officiels HurryCane® disponibles sur le site [HurriCane.com](#).

Les produits Drive PreserveTech™ sont fabriqués avec un agent antimicrobien * qui aide à minimiser la croissance des bactéries et des moisissures responsables des taches et des odeurs sur les surfaces traitées. Les surfaces traitées sur ce produit incluent la poignée.

* Les propriétés antimicrobiennes sont intégrées pour protéger les produits.

Ces produits ne protègent pas les utilisateurs ou autres contre les bactéries, virus, germes ou autres organismes pathogènes.

CARACTÉRISTIQUES


- Approuvé FDA
- Huit ajustements possibles pour la hauteur.
- Longueur repliée 35 cm (13,75 po)

Commentaires, rétroaction ou questions


Numéro sans frais : 1 800 933-1136
Courriel : succes@hurrycane.com [HurryCane.com](#)
Like us on Facebook: [facebook.com/AllTerrainCane](#)

RÉTABLIR LE FLEX


La base pivotante d'une nouvelle canne HurryCane® est conçue pour avoir moins de flexibilité lors des premières utilisations, mais au fil du temps, elle s'adapte à la démarche de son utilisateur. Suivez ces trois étapes simples pour rétablir la rigidité du Flex

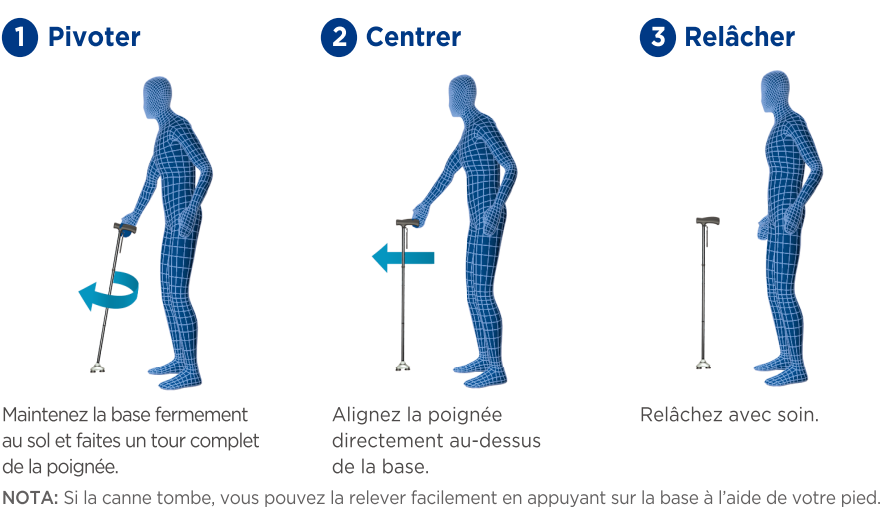

INSTRUCTIONS DE REMISAGE

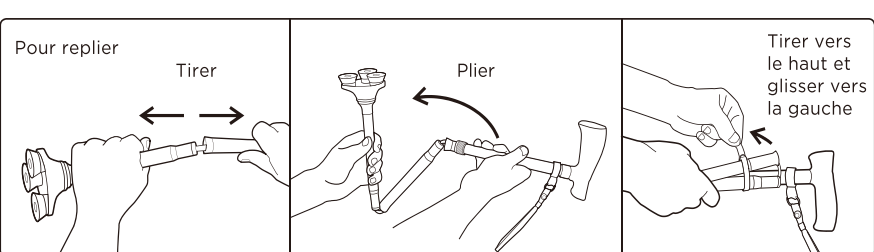

© 2022 HurryWorks LLC
99 Seaview Boulevard | Port Washington, NY 11050
[HurryCane.com](#) | **Made in China**
VER.A.5.22

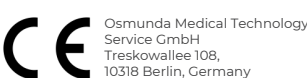

MANTENIMIENTO

- Revisar los cordones elásticos antes de cada uso. No usar el bastón si el cordón elástico está cortado, deshilachado o dañado.
- Revisar regularmente los tornillos sobre las patas para asegurarse de que estén apretados.
- Reemplazar las patas cada seis meses. Visite [HurryCane.com](#) para comprar nuevas patas.
- Mejore su movilidad visitando [HurryCane.com](#) para ver accesorios oficiales HurryCane®.



Los productos Drive PreserveTech™ están fabricados con un agente antimicrobiano * que ayuda a minimizar el crecimiento de bacterias y moho que causan manchas y olores en las superficies tratadas. Las superficies tratadas de este producto incluyen la empuñadura.

* Las propiedades antimicrobianas están incorporadas para proteger los productos.

Estos productos no protegen a los usuarios ni a otras personas contra bacterias, virus, gérmenes u otros organismos patógenos.

ESPECIFICACIONES


- Listado con la FDA
- Ocho alturas ajustables: Desde 30 ½" a 37 ½"
- Tamaño doblado: 13 ¾"

Comentarios, retroalimentación o preguntas


Llamada gratuita: 1-800-933-1136
Correo electrónico: succes@hurrycane.com
[HurryCane.com](#)
Denos me gusta en Facebook: [facebook.com/AllTerrainCane](#)

REAJUSTE DE FLEXIBILIDAD

La base giratoria de un nuevo HurryCane® está diseñada para tener menos flexibilidad inicialmente pero se adaptará al movimiento del usuario con el tiempo. A medida que el bastón se adapta a sus movimientos, puede ser posible que tenga que volver a ajustar la flexibilidad de su HurryCane® cuando quiera que el bastón se quede parado a su lado sin tener que sujetarlo. Siga los siguientes 3 pasos para "volver a ajustar la flexibilidad":

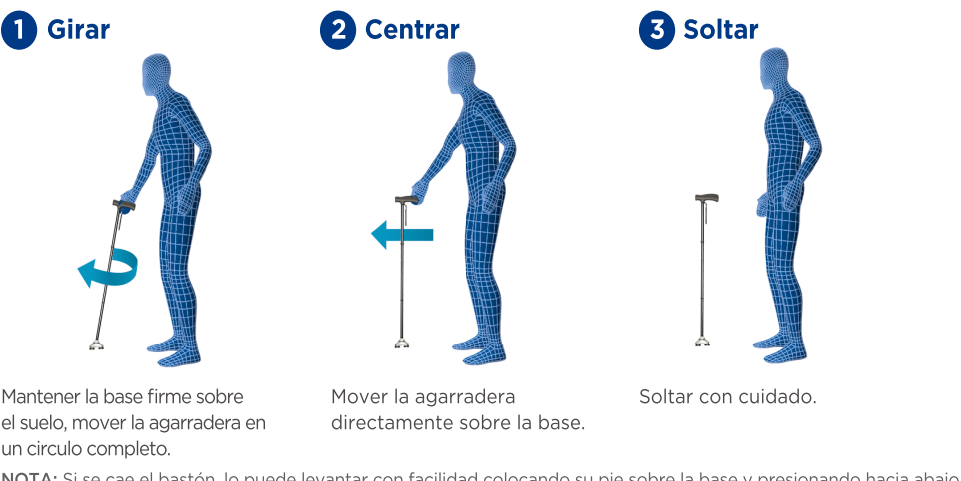

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE

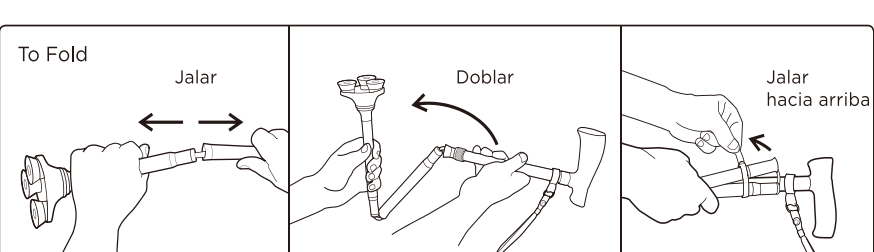

© 2022 HurryWorks LLC
99 Seaview Boulevard | Port Washington, NY 11050
[HurryCane.com](#) | **Made in China**
VER.A.5.22

