

AXIOM

for Kids

BACKS

AXIOM KIDS BACKREST HARDWARE

QUICK START GUIDE

Tool Needed:

- 10mm wrench





- tape measure or level




Assemblies Included:

Two sets of fasteners provided. Reference Fastener Key below.

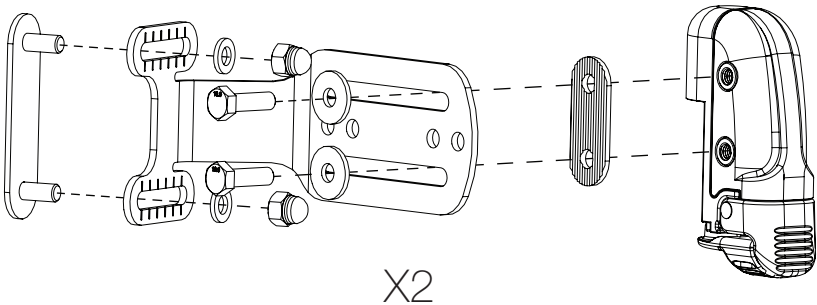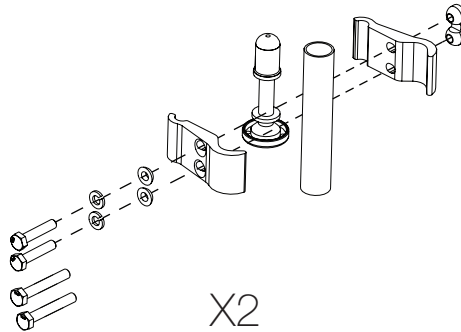


Fastener Key:

Fastener drawings are actual size so hardware can be compared to drawings.

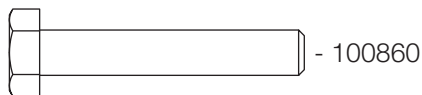


35mm (Used for 1" and 1-1/8" back canes)

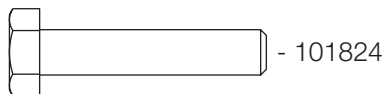


30mm (Used for 3/4" and 7/8" back canes)

General Setup (Before Delivery)


- ① Install backrest bracket to the back of the backrest shell with stud plate, two washers and two nuts using a 10mm wrench. Leave hardware loose. Repeat on opposite side.

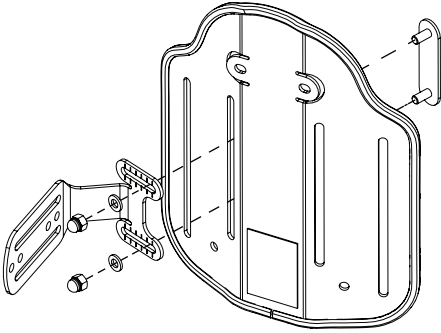

- ② Install housing to bracket with two bolts, two washers and saddle using a 10mm wrench. Leave hardware loose. Repeat on opposite side.

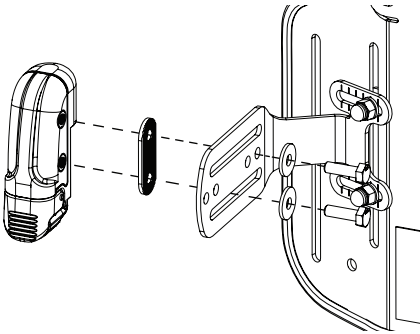


- ③ Visualize the backrest on the chair. Determine the approximate height desired for the user and range of adjustability desired. Optional extension brackets are available if additional forward adjustment is needed. Typically, the backrest will rest 1-2" above the cushion.

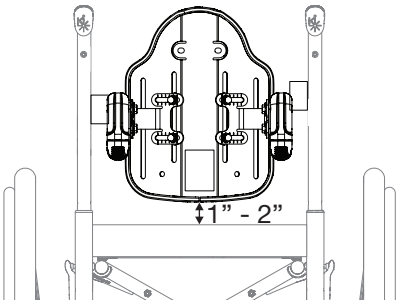


- ④ Determine the clamp fasteners needed by referencing the Fastener Key on the previous page of this document.


- ⑤ Loosely assemble the clamps onto the back canes at the desired location talked about in step 3. Bolts should thread inwards from the outside of the chair. Tighten clamp enough so it stays in place and repeat on opposite side.

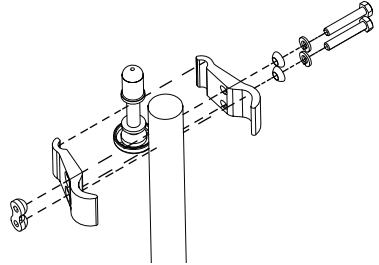


- ⑥ Use a level and a tape measure to ensure the clamps are level and the distance from backcane to clamp mount is 1/2".

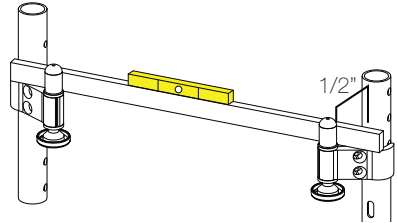

- ⑦ Install backrest assembly onto the clamp mounts. Adjust the back height by moving the backrest along the plate up or down to desired height.

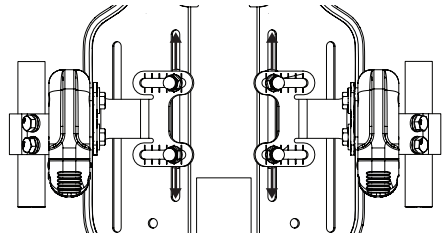

- ⑧ Adjust the depth and angle by moving the backrest assembly to the desired positions. With position determined, ensure the bolts are secured in the same position on both sides of the chair.

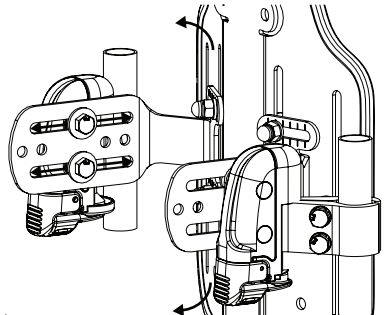

Perform Check, see Check Section in next section.

Fitting Adjustments (User Present)





WARNING

WARNING: IT MAY BE POSSIBLE TO ADJUST THE FINAL POSITION OF THE AXIOM BACK WITH AN END USER SEATED IN HIS WHEELCHAIR. THIS REQUIRES THAT THE END USER BE ABLE TO SIT IN A STABLE POSITION WITHOUT THE USE OF THE BACKREST. IT MAY ALSO BE POSSIBLE IF THERE ARE PEOPLE WHO CAN SUPPORT THE END USER DURING ADJUSTMENT. THIS SHOULD BE VERIFIED BY A CLINICIAN TRAINED TO MAKE THAT DETERMINATION. ALWAYS MAKE SURE THE WHEELCHAIR WHEEL LOCKS AND ANTI-TIPS ARE SET AND LOCKED. IF THESE CONDITIONS CANNOT BE MET, THE END USER SHOULD TRANSFER FROM THE WHEELCHAIR BEFORE MAKING ADJUSTMENTS. FAILURE TO TAKE THESE PRECAUTIONS MAY RESULT IN A FALL AND THE POTENTIAL FOR A SERIOUS INJURY.

- ① Adjust the angle and depth of the backrest by loosening the two bolts on the bracket. Grab and move/tilt the backrest assembly to desired position. Retighten hardware once desired configuration is achieved.

- ② Adjust the height of the backrest by loosening the two bolts on the backrest bracket. Slide the shell up or down to desired height and retighten hardware once desired configuration is achieved.

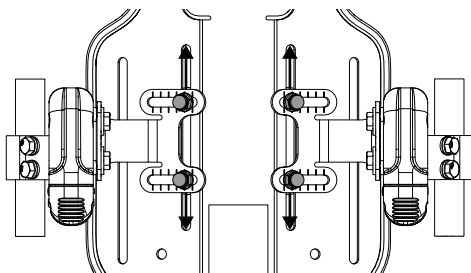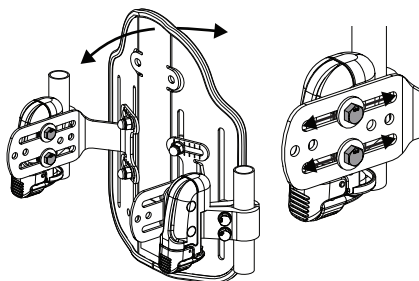

Perform Check -

- Tighten all fasteners completely and assure that the hardware does not move out of the adjusted position under the load of the user.
- Verify the back releases and latches easily.
- Lift the backrest up by the strap and ensure it stays locked in.

If you have any questions or concerns about any aspect of this Axiom back, please do not hesitate to contact us by:

Telephone:

715-254-0991

In Writing at:

Ki Mobility

5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A

Or via email at:

sales@kimobility.com



Ki Mobility

5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481

715-254-0991

www.kimobility.com

DCN1151.0

AXIOM

for Kids

BACKS

TORNILLERÍA PARA EL ESPALDAR DE AXIOM KIDS

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Herramienta necesaria:

- Llave de 10mm





- Cinta métrica o nivelador



Conjuntos incluidos:


Se proporcionaron dos juegos de sujetadores.

Consulte la clave de sujeción a continuación.

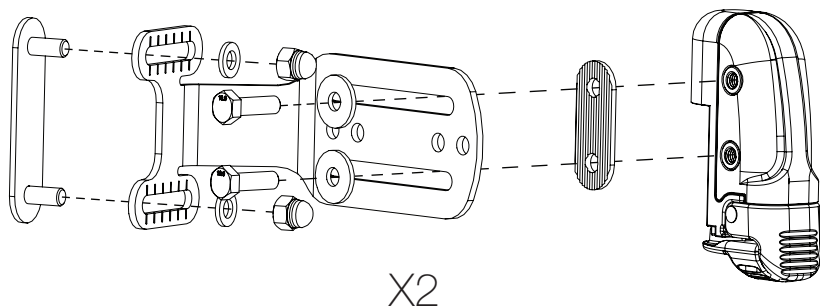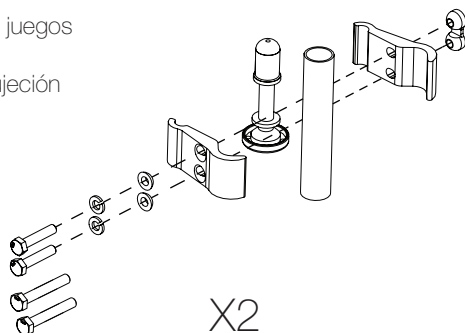


Clave de sujetadores:

Los dibujos de los sujetadores son de tamaño real, por lo que la tomillería se puede comprar con los dibujos.

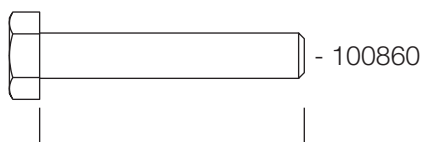


35mm (utilizando para varas de espaldar de 1" y 1-1/8")

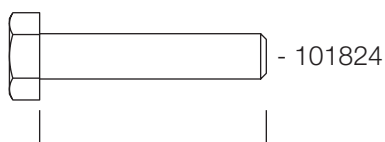


30mm (utilizado para varas de espaldar de 3/4" y 7/8")

Configuración general (previa a la entrega)


- ① Instale el soporte del espaldar en la parte posterior de la carcasa del espaldar con la placa de pernos, dos arandelas y dos tuercas empleando una llave de 10 mm. Deje la tornillería suelta. Repítalo del lado opuesto.

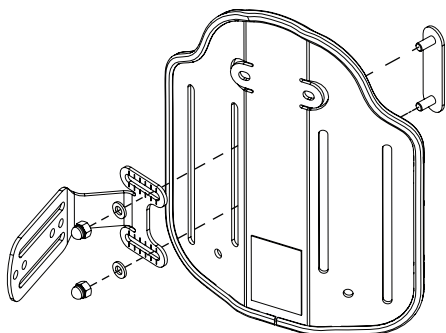

- ② Instale el alojamiento en el soporte con dos pernos, dos arandelas y el receptor con una llave de 10 mm. Deje la tornillería suelta. Repítalo del lado opuesto.

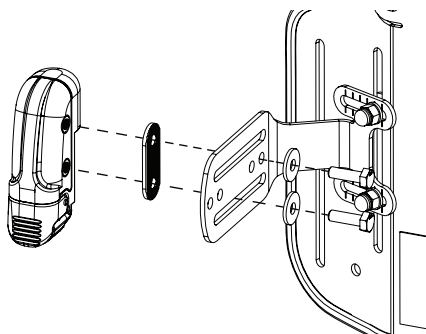


- ③ Visualice el espaldar en la silla. Determine la altura aproximada que se desea para el usuario y el rango de capacidad de ajuste que se quiere. Hay soportes de extensión opcionales disponibles si se necesita un ajuste hacia adelante adicional. Generalmente, el espaldar descansará de 2,5 a 5 cm por encima del cojín.

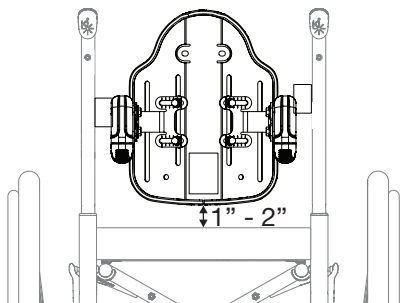


- ④ El esquema de fijadores al final de este documento lo ayudará a determinar cuáles son los fijadores de abrazadera necesarios.


- ⑤ Montar sin excesiva presión las abrazaderas sobre los tubos del espaldar en la posición deseada según el peso 3. Los pernos deben filetearse hacia adentro desde el exterior de la silla de ruedas. Apretar la abrazadera hasta que quede firme en su lugar, y repetir en el lado opuesto.

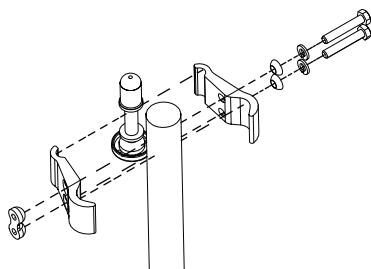


- ⑥ Usar un nivelador y una cinta métrica para asegurarse que las abrazaderas estén niveladas y que la distancia del tubo posterior al montaje de la abrazadera sea de 1/2".

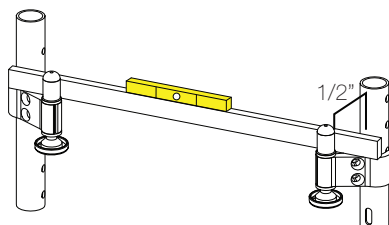

- ⑦ Instale el conjunto del espaldar en las monturas de la abrazadera. Ajuste la altura del espaldar moviendo éste a lo largo de la placa hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada.

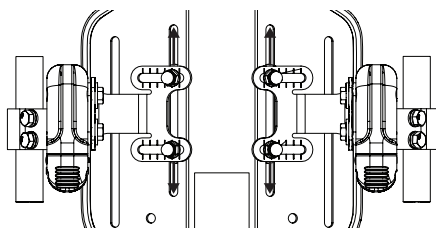

- ⑧ Ajuste la profundidad y ángulo moviendo el conjunto del espaldar a las posiciones deseadas. Habiéndose determinado la posición, asegúrese de que los pernos estén instalados en la misma posición a ambos lados de la silla.

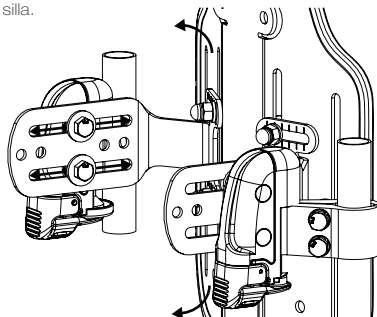


Control, consulte la sección Check en la siguiente sección.

Regulación y configuración (con el usuario sentado)


⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: ES POSIBLE REGULAR LA POSICIÓN FINAL DEL ESPALDAR AXIOM MIENTRAS EL USUARIO ESTÁ SENTADO EN SUSILLA DE RUEDAS SÓLO SI PUEDE GUARDAR UNA POSICIÓN ESTABLE SIN APOYARSE EN EL RESPALDO. ESTO TAMBIÉN SERÁ POSIBLE CON LA AYUDA DE PERSONAS QUE SOSTENGAN AL USUARIO DURANTE LA REGULACIÓN. UN MÉDICO ESPECIALIZADO EN ESTOS CASOS PODRÁ DETERMINARLO. VERIFICAR SIEMPRE QUE LOS SEGUROS DE LAS RUEDAS Y LOS ANTIVUELCO DE LA SILLA ESTÉN ACTIVADOS Y FIRMES EN SU LUGAR - SI NO FUERA POSIBLE, EL USUARIO DEBERÁ TRANSFERIRSE DE LA SILLA DE RUEDAS PARA PODER PROCEDER A LA REGULACIÓN. DEBE OBSERVARSE ESTA PRECAUCIÓN PARA EVITAR CAÍDAS Y POTENCIALES DAÑOS GRAVES.

- ① Regular la angulación y la profundidad del respaldo aflojando los dos bulones del soporte. Aferrar y desplazar o reclinar el conjunto del respaldo hasta la posición preferida. Cerciorarse que ambos lados se hallen en el mismo diente para que la posición sea idéntica. Volver a apretar el hardware una vez lograda la configuración deseada.

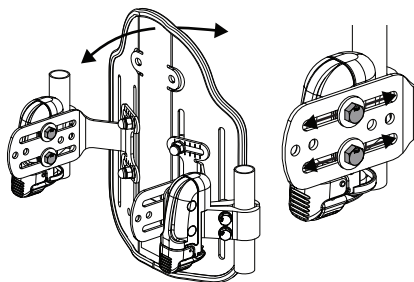

- ② Ajuste la altura del espaldar aflojando los dos pernos del soporte del espaldar. Deslice la carcasa hacia arriba o hacia abajo hasta la altura deseada y vuelva a apretar la tornillería una vez que se consiga la configuración deseada.

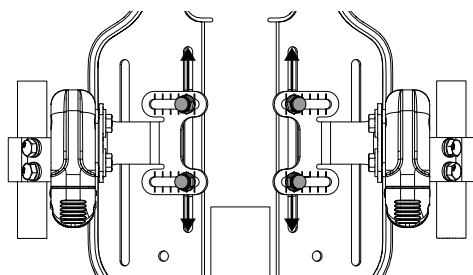

Control -

- Apretar firmemente todos los fijadores y verificar que el hardware no se mueva de la posición configurada cuando se sienta el usuario.
- Controlar que el espaldar se libere y se vuelva a enganchar con la facilidad.
- Levantar el respaldo de la cinta y verificar que permanezca.

Si tiene cualquier pregunta o inquietud sobre cualquier aspecto del espaldar de la Axiom, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Teléfono:

715-254-0991

Por escrito a:

Ki Mobility

5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A

O por correo electrónico en:

sales@kimobility.com



Ki Mobility

5201 Woodward Drive
Stevens Point, Wisconsin 54481

715-254-0991

www.kimobility.com

DCN1151.0